



Fortuna Viva Lit de soins

Ce que propose Embru


Embru offre qualité, fonctionnalité et confort. Simple, élégant et de la plus haute qualité Embru, le Fortuna Viva se présente. Grâce à la télécommande innovante et lumineuse, il est réglable facilement, de façon compréhensible et sûre dans de nombreuses positions. Tous les réglages se font en douceur et silencieusement. L'occupant ressent la stabilité du lit et se sent à l'aise et en sécurité.

Les protections latérales asymétriques sont levées d'une seule main et offrent à l'occupant protection et sécurité. Grâce à sa construction extrêmement stable et la conception asymétrique de la protection latérale, le lit peut également être utilisé comme une aide à l'entrée et à la sortie. La surface de couchage, avec les bascules en caoutchouc logées dans les doubles lattes du dossier, offre un très grand confort et la meilleure prévention qui soit. Lorsque le dossier est réglé en position assise, le plan de couchage s'étend automatiquement et réduit ainsi les éventuels points de pression.





Prévention des
escarres par
**l'ajustement
automatique du
siège**


Options de réglage Reposez-vous bien !

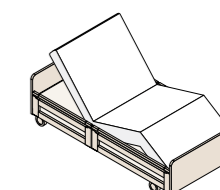


Position Fowler

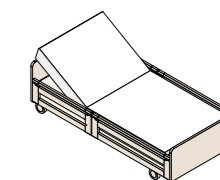


Réglage du dossier

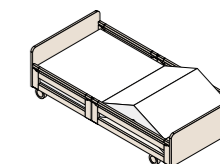


Réglage de
la partie genoux

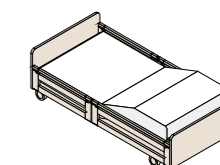

Positionnement
orthopédique

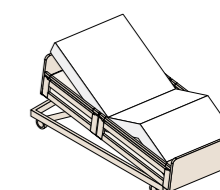

Abaissement des jambes
en position de confort

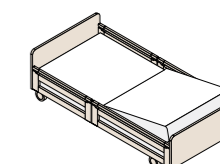


Surélévation des jambes


 **DEPUIS 1904
FABRICANT
DE MEUBLES SUISSE**

Fortuna Viva

Des arguments convaincants





Plage de réglage
progressive de
25 à 80 cm


Verrouillage
central très facile
à utiliser

La hauteur du lit peut être réglée à partir d'un niveau très bas de 25 cm, réglable en continu jusqu'à 80 cm. À 35 cm de hauteur, le lit s'arrête automatiquement et offre ainsi à l'occupant une position assise optimale. C'est dans la position la plus basse, à 25 cm, que la prévention des chutes est la meilleure.



Le blocage central des roulettes peut être actionné sans efforts depuis le côté et il est aussi facilement accessible par l'arrière à tout moment au moyen d'une longue pédale facile à utiliser.

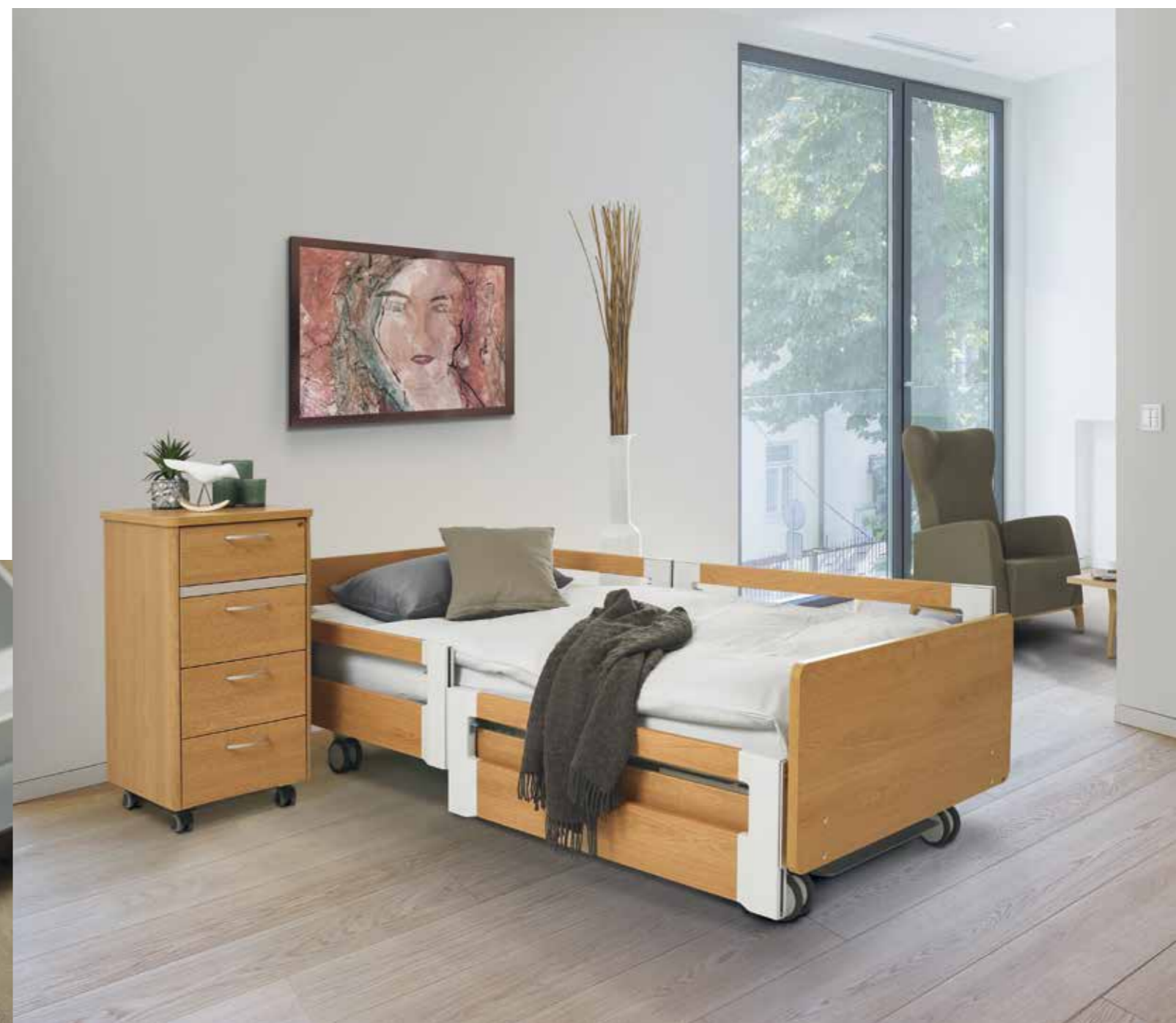



Surface de couchage confortable grâce aux doubles lattes flexibles



Surface de couchage ▲

Basculers flexibles, montés sur caoutchouc, logés dans les lattes à double ressort, offrant un confort maximal. Pour le nettoyage, ils peuvent être retirés en quelques secondes.

Télécommande simple et compréhensible



◀ **Télécommande**

Les symboles de grande taille et éclairés sur la commande manuelle sont clairs et faciles à lire grâce à l'éclat des couleurs.

Protection latérale

Les protections latérales, qui s'intègrent harmonieusement dans le cadre de lit, permettent à l'occupant de se sentir en sécurité et de bénéficier également d'une aide précieuse lors de l'entrée et de la sortie. La protection latérale fonctionne silencieusement et cette technologie ingénieuse empêche les deux parties de guidage de s'entrechoquer choquer. L'utilisation est extrêmement simple et la sécurité peut même être relevée d'une seule main. Résultat : les protections latérales sont tout simplement agréables à manipuler et les occupants ainsi que soignants ne pourront bientôt plus se passer de cette précieuse aide quotidienne. Les avantages en un coup d'œil :

- Fonctionnement simple et silencieux
- Aide intégrée à l'entrée et à la sortie grâce à la disposition asymétrique des protections latérales (87 cm/113 cm)
- Trois positions (bas/centre/haut)
- Stable et durable




Barrière latérale extrêmement stable et facile à utiliser



Couverture en filet pour une protection latérale discontinue.



Housse de rembourrage pour les protections latérales discontinues



◀ Support de couverture

Le support de couverture est discrètement intégré au niveau des pieds. En le touchant légèrement, il se déploie et peut être mis en place.



Extension de lit ▶

Avec cette option, le lit de soins Fortuna Viva peut être très facilement, et sans outils, être rallongé de 20 cm. Dans l'espace créé, l'écart peut être comblé en un tour de main par une extension de la surface de couchage et du matelas.



Éclairage sous le lit ▲

La rangée de LED, placée sous le lit, est activée par la télécommande et facilite l'orientation dans la pièce lorsqu'elle est sombre.

◀ Lampe

Embru propose une gamme de LED de haute qualité pour les lampes de lits. Le luminaire Conalux présenté peut être connecté directement au lit.

Bordure en bois

Le lit de soins Fortuna Viva s'adapte à tous les types d'habitat grâce à deux entourages en bois, et à cinq décors différents.

Modèle 5940




Avec montants en bois massif, tête 50 cm de haut, pied 42 cm de haut Avec fente de couette

Modèle 5950



Tête 50 cm de haut, pied 42 cm de haut

Décors standard

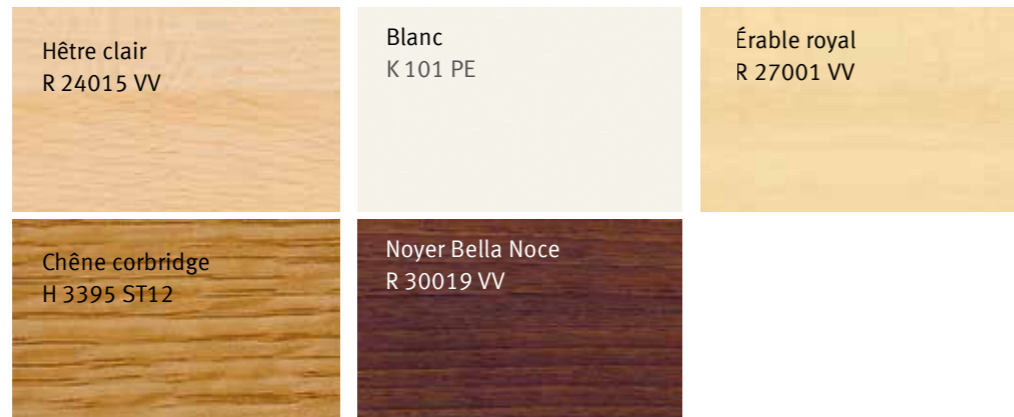


Accessoires

◀ Potence

La potence peut être branchée sur le côté gauche ou droit du lit et tournée dans deux positions fixes. Dans les deux positions, elle ne peut pas se tourner involontairement. Cela permet à l'occupant de la tenir de façon sûre.




Butoirs latéraux rotatifs par simple pression du pied



Butoir mural ▲

Le butoir mural peut être réglé de manière très pratique dans la position souhaitée. Avec le pied, le butoir mural est légèrement pressé et tourné. On n'a plus besoin de se mettre à genoux. La distance au mur peut en outre être très facilement réglée dans la position souhaitée grâce à un système d'enclenchement automatique. Dans la version simple, le même butoir mural existe également sans rotation.



◀ Utilisation avec l'extension du lit

Avec l'extension du lit (en option), la surface de couchage peut être rallongée jusqu'à une longueur de matelas de 220 cm.

Fortuna Viva

En un coup d'œil

Technologie

Version	4 moteurs Surface de couchage en 4 parties avec doubles lattes avec abaissement des pieds
Roulettes	4 roulettes doubles, Ø 10 cm
Dimensions	
Surface de couchage	200 × 90 cm
Longueur du lit	213 cm
Largeur du lit	96 cm (sans protections latérales) 103 cm (avec protections latérales)
Hauteur du lit avec potence	208 cm
Abaissement	15 cm (à partir de la hauteur de la surface de couchage 34 cm)
Poids	
Charge de travail sécurisée	250 kg
Poids total du lit environ	170 kg
Réglages possibles	
Plage de réglage de la surface de couchage	de 25 à 80 cm du sol avec position intermédiaire à 35 cm
Plage de réglage de la section de tête	réglable en continu de 0° à environ 70°
Plage de réglage du pli du genou	réglable en continu jusqu'à environ 40°, en supplément partie inférieure de la jambe, réglage manuel
Abaissement des jambes	15°

Options

Surface de couchage	200 × 100 cm
Extension du lit	20 cm
Protection latérale discontinue	Modèle 5925
Support de couverture	Modèle 5954
Réglage	de la tête en position basse
Éclairage	Éclairage sous le lit

Accessoires

Potence	Modèle 5486
Butoirs latéraux muraux	Modèle 5970 pivotant Modèle 5975 fixe
Roulettes butoirs murales	Modèle 5932
Filet de protection	Modèle 5963
Housse de rembourrage	Modèle 5964
Jeu de protection latérale	Modèle 5973
Support de lampe	Modèle 5960
Extension de la surface de couchage	Modèle 5968
Pièce d'extension de matelas	Modèle 5966
Aide au transport	Modèle 5976 (largeur du lit 90 cm) Modèle 5986 (largeur de lit 100 cm)



Embru produit des meubles pour la vie

Depuis des dizaines d'années, Embru est une entreprise qui a fait ses preuves. C'est un fabricant fiable de meubles modernes de grande qualité. Plus de 200 employés en Suisse développent et construisent des meubles pour la vie.

Retrouvez toute la gamme sur www.embru.ch/fr/soins

embru
meubles pour toute une vie

Ecole | Soins | Bureau | Les classiques

Embru-Werke AG
Rapperswilerstrasse 33
CH-8630 Rüti ZH
+41 55 251 11 11
pflege@embru.ch
www.embru.ch

Embru-Werke AG
Route de Grandcour 74
CH-1530 Payerne VD
+41 26 662 49 22
soins@embru.ch
www.embru.ch



Climatiquement neutre

Imprimé
ClimatePartner.com/53149-2111007

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

10.2021
500 pièces
Changements techniques réservés

embru

meubles pour toute une vie